


Thermo Scientific™ iCAP™ 6000/7000シリーズICP-OES メンテナンスサイクル

機器の稼働状況や消耗品の摩耗に合わせて1年に1回プロアクティブサポートプラン ベーシック、3年に1回プロアクティブサポートプラン プラス、6年に1回プロアクティブサポートプラン プレミアムの実施を推奨しています。

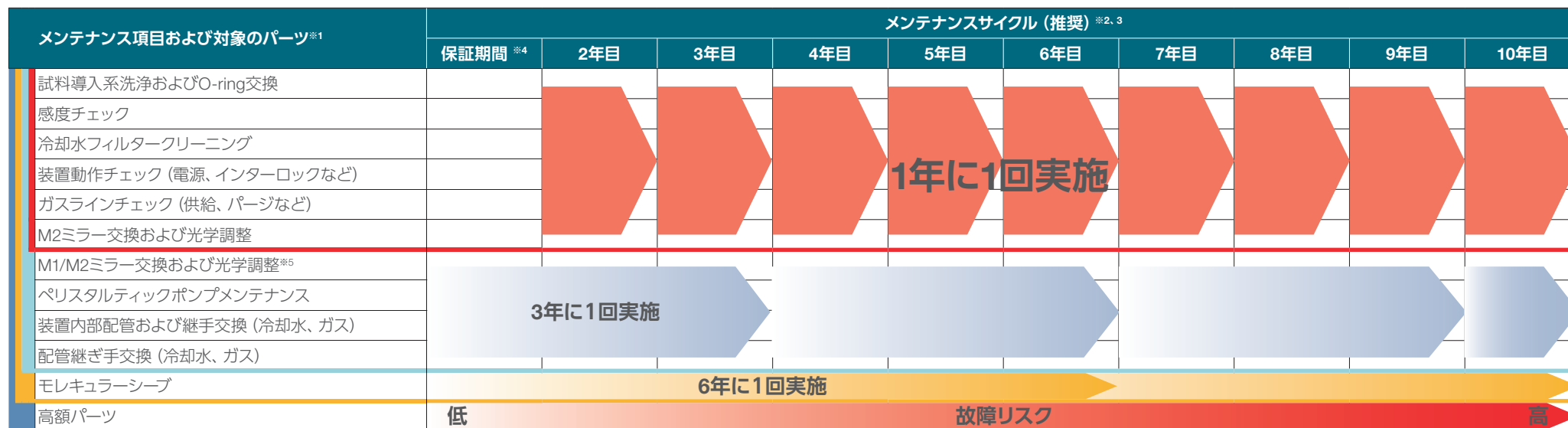

各サポートプランでカバーされる範囲 ※6:

- プロアクティブサポートプラン ベーシック
- プロアクティブサポートプラン プラス
- プロアクティブサポートプラン プレミアム
- エッセンシャルサポートプラン

※1 通常消耗品は保証の対象外です。

※2 パーツ交換の周期や故障リスクは、使用頻度、設置環境の影響を受けます。

※3 試料導入系などの消耗品費用や、ユーザー様による日常点検項目に該当する作業等は、サポートプランには含まれません。

※4 保証期間には、点検は含まれません。別途サポートプランへのご加入が必要です。

※5 M1、M2両方を含めたミラー交換を推奨します。

※6 サポートプランの詳細は、カスタマーサポート本部までお問い合わせください。

Thermo Scientific™ iCAP™ RQ ICP-MS メンテナンスサイクル

メンテナンス項目および高額パーツ※1	メンテナンスサイクル (推奨) ※2, 3										
	保証期間 ※4	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	
試料導入系チェックおよびO-ring交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
エクストラクションレンズ洗浄		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
性能確認		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
ロータリーポンプオイル交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
ターボポンプオイルリザーバ交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
真空ゲージ電極交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
オイルミストフィルター交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
エクспанションバルブO-ring交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
エアフィルター交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
冷却水フィルター洗浄および冷却水交換		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
ペリスタルティックポンプメンテナンス		3年に1回実施									
検出器交換		3年から6年以内に実施									
ロータリーポンプ交換※6		3年から6年以内に実施									
ターボポンプ交換※6		3年から6年以内に実施									
Qセル洗浄または交換		故障 (汚染) リスク									
高額パーツ		故障 (汚染) リスク									

各サポートプランでカバーされる範囲 ※5:

プロアクティブサポートプラン

エッセンシャルサポートプラン

※1 通常消耗品は保証の対象外です。 ※2 パーツ交換の周期や故障リスクは、使用頻度、設置環境の影響を受けます。

※3 試料導入系などの消耗品費用や、ユーザー様による日常点検項目に該当する作業等は、サポートプランには含まれておりません。 ※4 保証期間には、点検は含まれません。別途サポートプランへのご加入が必要です。

※5 サポートプランの詳細は、カスタマーサポート本部までお問い合わせください。 ※6 ロータリーポンプ及びターボポンプの交換は、毎年、弊社点検作業を実施しているユーザー様のみを対象とさせていただきます。

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。 IES017_A19080B

ここに記載の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

また、記載されている製品は研究用機器であり、診断目的およびその手続き上での使用はできません。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

実際の販売価格は、当社販売代理店までお問い合わせください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

カスタマーサポート本部

TEL : 0120-753-670 FAX : 0120-753-671

Support.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com