


Applied Biosystems PrioCHECK经典猪瘟病毒(CSFV)血清学检测系列产品 原Prionics品牌

经典猪瘟病毒系统诊断工具

赛默飞世尔科技提供四种经典猪瘟(CSF)血清学诊断产品，适合疾病各个阶段的诊断应用。

PRIOCHECK CSFV抗体检测试剂盒


Applied Biosystems™ PrioCHECK™ CSFV抗体ELISA检测试剂盒适用于猪群的大规模筛查，也可用于评估免疫猪群的免疫状况。试剂盒采用间接ELISA原理，检测CSFV的E2膜蛋白的抗体。这种检测方法非常适合自动化操作。在多次大规模的CSF暴发中，该试剂盒都表现出卓越的敏感性和特异性。PrioCHECK CSFV抗体ELISA检测试剂盒可实现自动化操作，仅需两个小时就可以得到准确的结果，是一种快速的诊断工具。

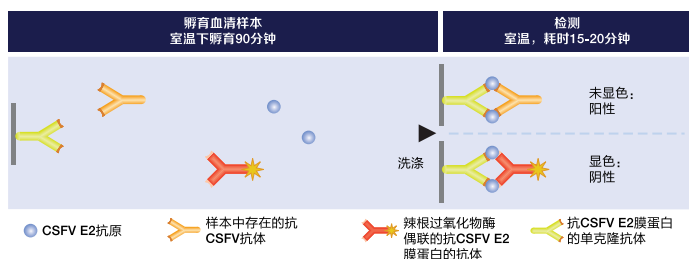

PRIOCHECK CSFV 2.0抗体检测试剂盒


PrioCHECK CSFV 2.0抗体检测试剂盒和CSFV相近的病毒没有交叉反应，可实现CSFV的更高特异性的检测。

试剂盒经过特殊优化，减少了与相近的牛病毒性腹泻病毒(BVDV)以及边界病毒(BDV)产生交叉反应的风险。PrioCHECK CSFV 2.0抗体检测试剂盒特异性检测CSFV E2蛋白A结构域的抗体。该试剂盒在操作过程中极其稳定，适用于确认检测。PrioCHECK CSFV 2.0抗体检测试剂盒对于CSFV具有高度特异性。

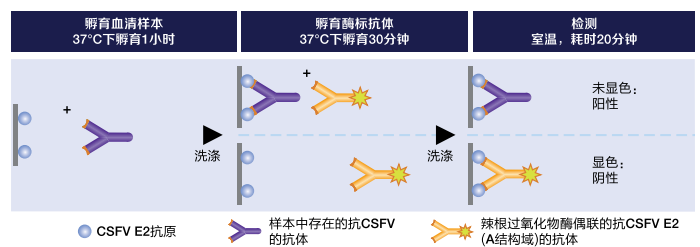

PRIOCHECK CSFV抗原检测试剂盒


Applied Biosystems品牌的PrioCHECK CSFV抗原检测试剂盒检测CSFV病原，能实现疾病的早期诊断，非常适用于CSFV感染高风险地区疑似感染群体的检测。该试剂盒已经成功应用于多个CSFV感染高风险地区的诊断实践中。PrioCHECK CSFV抗原检测试剂盒也适用于急性感染期的猪只的检测。

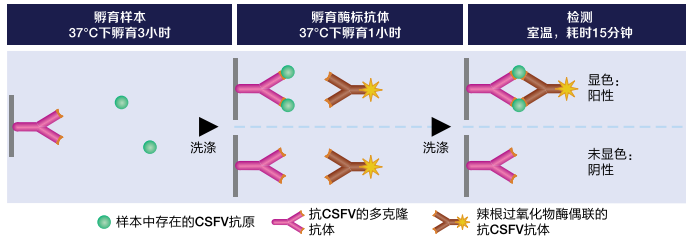

PRIOCHECK CSFV E^{RNS}抗体检测试剂盒

PrioCHECK CSFV E^{RNS}抗体检测试剂盒与E2标记疫苗配合使用，用于免疫猪群中感染猪只的鉴别。PrioCHECK CSFV E^{RNS}抗体检测

试剂盒特异检测CSFV结构蛋白E^{RNS}的抗体，与E2亚单位疫苗配合使用时，可区分疫苗免疫和野毒感染的猪只。该试剂盒使用单一的单克隆抗体，因此具有高度特异性。

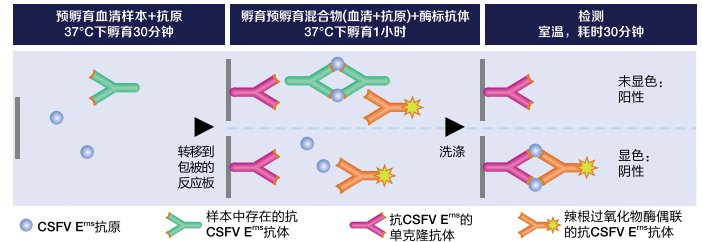

经典猪瘟(CSF)

经典猪瘟病毒(CSFV)，也被称作猪霍乱，是一种猪群的病毒性传染病，在全球范围内流行。CSFV是瘟病毒属的成员之一，与BVDV和BDV同属于该属的黄病毒科。该病属于A类疫病，是世界动物卫生组织(OIE)的法定报告疫病。CSFV是一种高度传染性的疫病，该病的暴发对养猪行业造成了严重的经济损失。

订购信息

品名	检测类型	规格	货号
PrioCHECK CSFV抗体检测试剂盒	ELISA	192个检测/2板，可拆分	7610048
PrioCHECK CSFV抗体检测试剂盒	ELISA	480个检测/5块板，不可拆分	7610046
PrioCHECK CSFV 2.0抗体检测试剂盒	ELISA	480个检测/5板，可拆分	7610600
PrioCHECK CSFV抗原检测试剂盒	ELISA	192个检测/2板，可拆分	7610047
PrioCHECK CSFV抗原检测试剂盒	ELISA	480个检测/5板，可拆分	7610050
PrioCHECK CSFV E ^{RNS} 抗体检测试剂盒	ELISA	480个检测/5板，可拆分	7610370
相关产品信息			
CSFV qPCR检测试剂盒(配套4415330使用)	qPCR	100个检测	4486946
VetMAX-Plus一步法多重RT-PCR预混液	qPCR	100个反应	4415330

如需了解更多，请登录 thermofisher.com/animalhealth



赛默飞
官方微信



赛默飞
Applied Biosystems
官方微信

免费服务电话: 800 820 8982/400 820 8982
销售服务信箱: sales.china@thermofisher.com
技术咨询信箱: lifescience-cnts@thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC